



CHU
Hôpitaux de
Bordeaux

Entité d'application : US/LBM- ---- - Prélèvements sanguins

Emetteur : PBP - P1B - ----

EN_LAB_16_2016

Ind : 02

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT

Page : 1/1

ORDRE DE PRELEVEMENT DES TUBES (PRELEVEMENT SANGUIN)

ORDRE DE PRÉLÈVEMENT RECOMMANDÉ



HEMOCULTURES OU PURGE



CITRATE



SST



CAT



LH



LH



EDTA



EDTA




GLUCOSE



AUTRES

*Autres tubes :
ACD, VS, Aprotinine
et tube Thrombine
(toujours en dernier)*

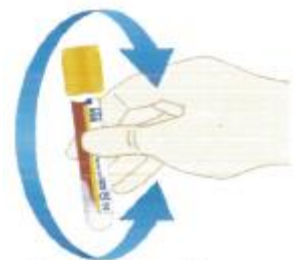

A la fin du prélèvement,
toujours homogénéiser
par plusieurs
retournements lents.

PRELEVEMENT SUR TUBE MICROMETHODE

1



Mauve

2



3



4



Dans le cas où, un bilan d'hémostase est demandé, il est recommandé de prélever le tube citraté après le tube EDTA et avant les tubes avec anticoagulant (position entre 1 et 2).