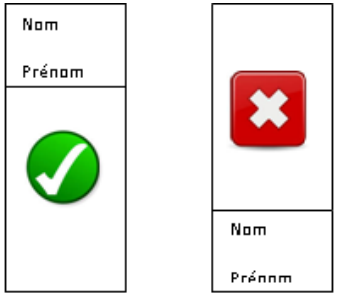
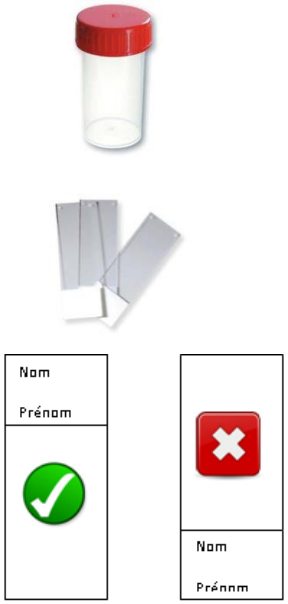
PRELEVEMENT D'UNE BIOPSIE (PULMONAIRE, GANGLIONNAIRE, …) SOUS MANIPULATION RADIOLOGIQUE

Nature du prélèvement	Matériel	Consignes de prélèvement	Feuille de prescription
Biopsie pulmonaire	 	Pot rouge à bouchon rouge à visser stérile, ou flacon tube à visser bouchon blanc, non stérile. **Pas de lames de bistouri dans les pots de formol.** Lames de prélèvement : respecter les recommandations d'étalement, IN LAB 402, guide du préleveur Si biopsie : rouler la biopsie doucement sur la lame et la déposer • immédiatement dans le formol tamponné 10%, pH7 • Si brossage : étaler sans écraser les cellules	1. Coller l'étiquette SIGMA **sur le pot et sur le bon de prescription** (lab001) : 2. Renseigner : • Le nom du préleveur • La date et l'heure de prélèvement • Les renseignements cliniques 3. Joindre la copie du bon de radiologie 4. Dans la pochette kangourou de transport, séparer les prélèvements des documents papier. Insérer dans la pochette compartiment prélèvement : • Le pot

Date d'application : 28/11/2016

TABLEAU D'APPROBATION					
	POUR LE GROUPE D'ELABORATION	**VALIDATION** (fonction qualité)	**AVIS EXPERT** (facultatif)	**APPROBATION** (responsable d'activité)	
Nom :	**DEHILLOTTE XAVIER**	**CHAUZIT EMMANUELLE**	**COMBOURIEU ISABELLE**	**POMMIERS SYLVIE**	**PR. BEATRICE VERGIER**
Signature :	**DOCUMENT VALIDE NUMERIQUEMENT**				

PRELEVEMENT D'UNE BIOPSIE (PULMONAIRE, GANGLIONNAIRE, …) SOUS MANIPULATION RADIOLOGIQUE

		Dater et inscrire le nom du patient sur les lames. Attention : pour l'identification des lames, ne pas utiliser de stylo type Bic ou feutre car les bains de solvants effacent les inscriptions. ⇨ Utiliser uniquement des crayons à papier ⇨ Identifier la lame en se référant au schéma ci-contre.	• Les lames doivent être placées dans le porte lame, coller l'étiquette patient sur le porte-lame également 5. Cocher la case Groupe Hospitalier Sud
Biopsie ganglionnaire		**Cas particulier d'un état frais, si matériel abondant :** Dans le cas du lymphome, si plusieurs fragments : ⇨ Mettre une biopsie à l'état frais dans une compresse très légèrement imbibée d'eau physiologique afin d'éviter la dessiccation du prélèvement. Puis, même procédure que pour les biopsies pulmonaires lorsqu'elles sont fixées en formol (cf première description) **Acheminer en urgence au laboratoire en respectant les horaires d'ouverture**	1. Coller l'étiquette SIGMA **sur le pot et sur le bon de prescription** (lab001) : 2. Renseigner : • Le nom du préleveur • La date et l'heure de prélèvement • Les renseignements cliniques 3. Joindre la copie du bon de radiologie 4. Dans la pochette kangourou de transport, séparer les prélèvements des documents papier. Insérer dans la pochette compartiment prélèvement : • Le pot • Les lames doivent être placées dans le porte lame, coller l'étiquette patient sur le porte-lame également 5. Cocher la case Groupe Hospitalier Sud

PRELEVEMENT D'UNE BIOPSIE (PULMONAIRE, GANGLIONNAIRE, …) SOUS MANIPULATION RADIOLOGIQUE

Transmission des échantillons au laboratoire	Aucun échantillon ne pourra être transmis au-delà de 17H00. Pour les échantillons en présence de formol, leur acheminement devra être différé à J+1 (conservation à température ambiante, au point de collecte de proximité). Les échantillons à l'état frais doivent impérativement être transmis, **sans délai**, le jour du prélèvement.

Laboratoire	GHP	GHS
Horaires d'ouverture	**07H30 / 17H00**	**08H00 / 17H00**
Téléphone secrétariat médical	**95904 – 95589**	**56455 – 56475**
Téléphone cadre	**15000**	**56631**